



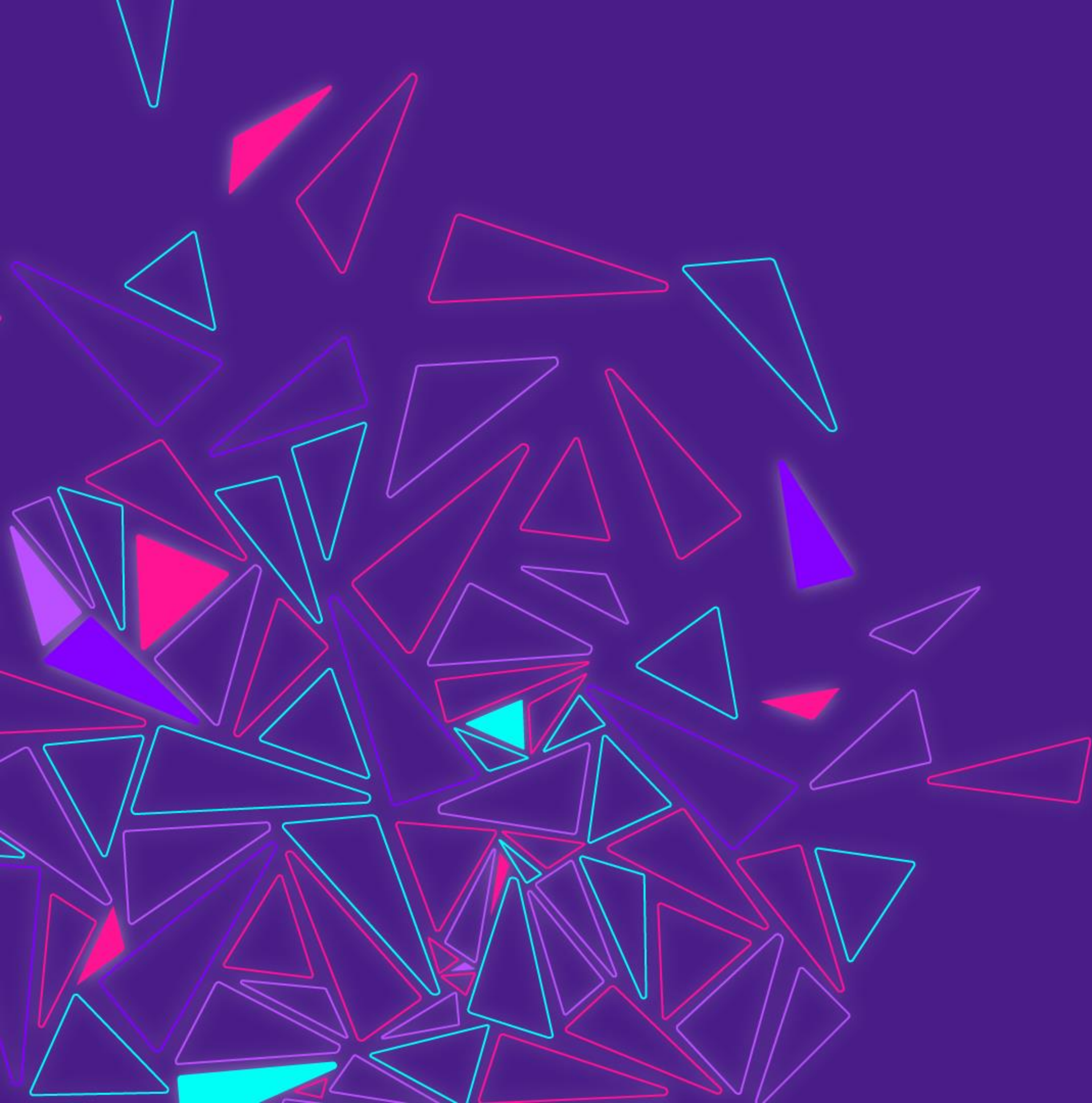

ANNAR
Health Technologies

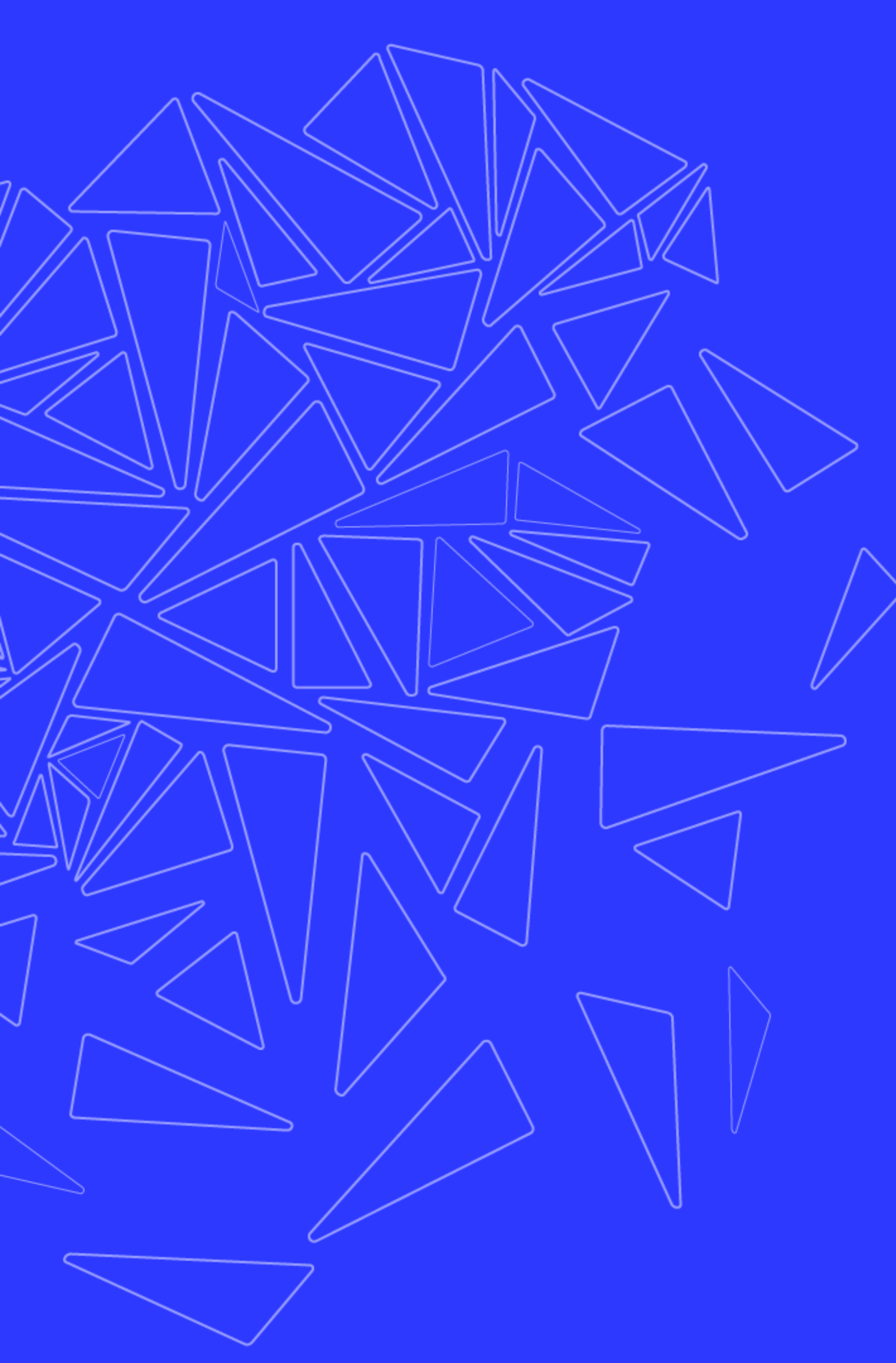

Informe de análisis Mensual Control de Calidad Interno E.S.E Hospital Departamental San Rafael Zarzal

Diana Marcela Velásquez Q.
Asesor de aplicaciones en calidad analítica

28 de marzo /2025
SSO-25-147206

<https://valiqc-departamental-rafael.ithealth.co/#/login>



Asistentes




IT	Participante	Cargo	Institución
1	Mónica Herrera	Coordinadora	Hospital Departamental San Rafael Zarzal
2	Diana Marcela Velásquez	Asesor de calidad	Annar Diagnostica

Temas a tratar



1	Seguimientos a compromisos
2	Desempeño general del laboratorio
3	Análisis de desempeño por programa (Comparativo sistema de medición)
4	Análisis de desempeño por programa (Analitos en alarma/calificación inaceptable)
5	Analitos en seguimiento
6	Compromisos adquiridos

Desempeño general del laboratorio – QUIMICA (Mes FEBRERO A MARZO)

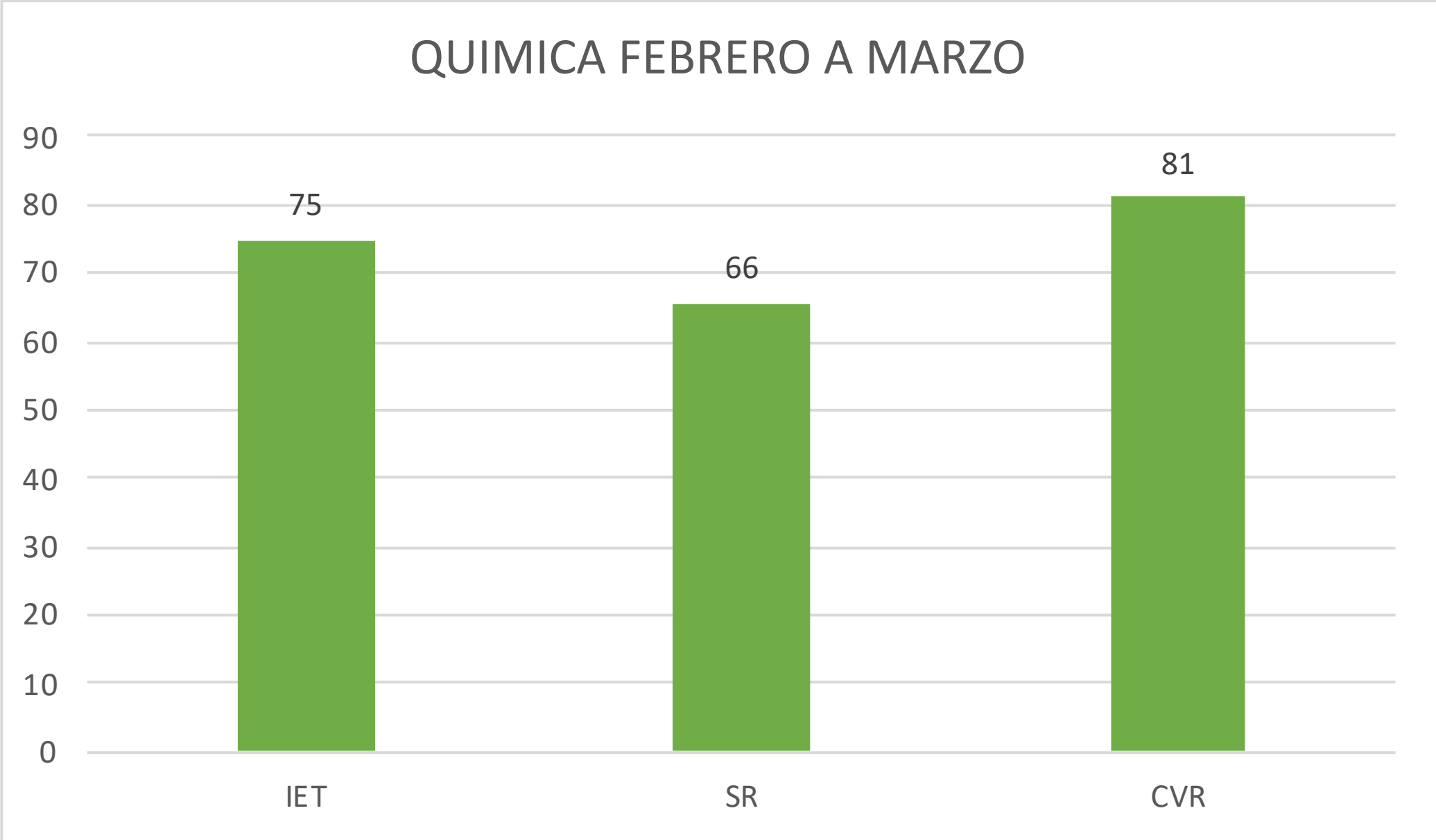

Posterior a la actualización de las metas y objetivos de calidad se obtuvieron los siguientes porcentajes de cumplimiento del control de calidad interno para el área de Química:

IET: CON UN CUMPLIMIENTO DE 75%.

SR: PRESENTA UN CUMPLIMIENTO DE 66%

CVR: PRESENTA CUMPLIMIENTO DE 81%



QUIMICA FEBRERO A MARZO			
	TOTAL	# CUMPLE	%
IET	32	24	75
SR	32	21	66
CVR	32	26	81

Análisis de desempeño Control Interno: Química




Informacion de Laboratorio					Información de Test					Objetivos de Calidad				Datos de Desempeño								ICT Indicadores de Competencia Técnica			
No	Sección	Sede	Ciudad	No Lab	Equipo	Lote QC	Analito	Nivel	Unidad	Fuente	%Tea	%CVa	%BIAS	Valor Diana	Media	DS	%CV	%Bias	%ET	IDM	No Datos	CVR	SR	IET	SIG
1	Química	Zarzal	Zarzal	00001	Mindray BS 240Pro	89740	Fosfatasa Alcalina	1	%	CLIA-USA	30	10	13.5	175	194.429	22.173	11.4	11.102	29.912	7.156	15	1.14	0.822	0.997	1.658
2	Química	Zarzal	Zarzal	00001	Mindray BS 240Pro	89740	Fosfatasa Alcalina	2	%	CLIA-USA	30	10	13.5	640	623.929	30.706	4.92	-2.511	10.629	9.91	15	0.492	0.186	0.354	5.587
3	Química	Zarzal	Zarzal	00001	Mindray BS 240Pro	89740	Albumina	1	%	Estado del Arte	10	3.3	4.56	4.17	4.554	0.06	1.32	9.209	11.387	0.021	13	0.4	2.02	1.139	0.599
4	Química	Zarzal	Zarzal	00001	Mindray BS 240Pro	89740	Albumina	2	%	Estado del Arte	10	3.3	4.56	2.73	3.198	0.041	1.28	17.143	19.255	0.014	13	0.388	3.759	1.926	-5.58
11	Química	Zarzal	Zarzal	00001	Mindray BS 240Pro	89740	Bilirrubina directa	1	%	Variabilidad Biologica Mínimas	36.9	15.1	11.9	0.38	0.329	0.032	9.73	-13.421	29.476	0.011	14	0.644	1.128	0.799	2.413
12	Química	Zarzal	Zarzal	00001	Mindray BS 240Pro	89740	Bilirrubina directa	2	%	Variabilidad Biologica Mínimas	36.9	15.1	11.9	1.22	1.069	0.088	8.23	-12.377	25.956	0.029	14	0.545	1.04	0.703	2.98
15	Química	Zarzal	Zarzal	00001	Mindray BS 240Pro	89740	AST(GOT)	1	%	Variabilidad Biologica Mínimas	18.6	6.4	8	41.62	38.893	3.018	7.76	-6.552	19.356	1.008	14	1.212	0.819	1.041	1.553
16	Química	Zarzal	Zarzal	00001	Mindray BS 240Pro	89740	AST(GOT)	2	%	Variabilidad Biologica Mínimas	18.6	6.4	8	203.4	198.179	10.786	5.44	-2.567	11.543	3.603	14	0.85	0.321	0.621	2.947
17	Química	Zarzal	Zarzal	00001	Mindray BS 240Pro	89740	ALT(GPT)	1	%	Variabilidad Biologica Mínimas	18.6	6.4	8	234	24.243	1.38	5.69	-89.64	99.029	0.461	14	0.889	11.205	5.324	-12.485
18	Química	Zarzal	Zarzal	00001	Mindray BS 240Pro	89740	ALT(GPT)	2	%	Variabilidad Biologica Mínimas	18.6	6.4	8	85.99	90.071	5.401	6	4.746	14.646	1.804	14	0.938	0.593	0.787	2.309
23	Química	Zarzal	Zarzal	00001	Mindray BS 240Pro	89740	Glucosa	1	%	Variabilidad Biologica Mínimas	9.2	3.4	3.5	85.96	89.129	1.968	2.21	3.687	7.333	0.657	14	0.65	1.053	0.797	2.495
24	Química	Zarzal	Zarzal	00001	Mindray BS 240Pro	89740	Glucosa	2	%	Variabilidad Biologica Mínimas	9.2	3.4	3.5	283.9	326.75	158.333	48.46	15.093	95.052	52.895	14	14.253	4.312	10.332	-0.122
27	Química	Zarzal	Zarzal	00001	Mindray BS 240Pro	89740	Urea	1	%	CLIA-USA	9	3	4	16.3	15.312	1.613	10.53	-6.061	23.435	0.539	14	3.51	1.515	2.604	0.279
28	Química	Zarzal	Zarzal	00001	Mindray BS 240Pro	89740	Urea	2	%	CLIA-USA	9	3	4	40.41	42.599	3.363	7.89	5.417	18.435	1.123	14	2.63	1.354	2.048	0.454
29	Química	Zarzal	Zarzal	00001	Mindray BS 240Pro	89740	Acido urico	1	%	Variabilidad Biologica Mínimas	17.95	6.45	7.3	5.02	5.692	0.25	4.39	13.386	20.63	0.087	13	0.681	1.834	1.149	1.04
30	Química	Zarzal	Zarzal	00001	Mindray BS 240Pro	89740	Acido urico	2	%	Variabilidad Biologica Mínimas	17.95	6.45	7.3	9.83	10.646	0.318	2.99	8.301	13.234	0.11	13	0.464	1.137	0.737	3.227

Análisis de desempeño Control Interno: Química

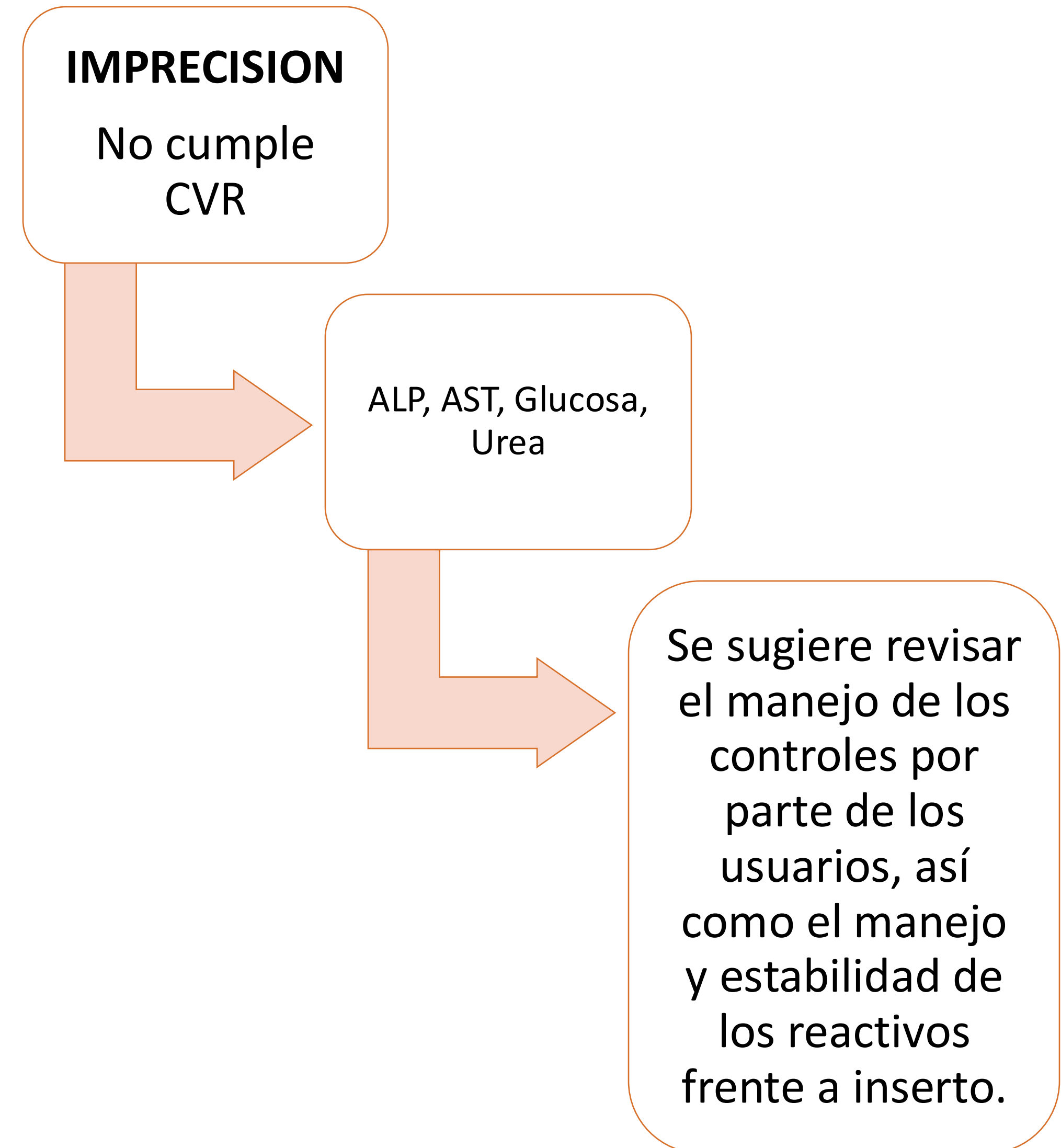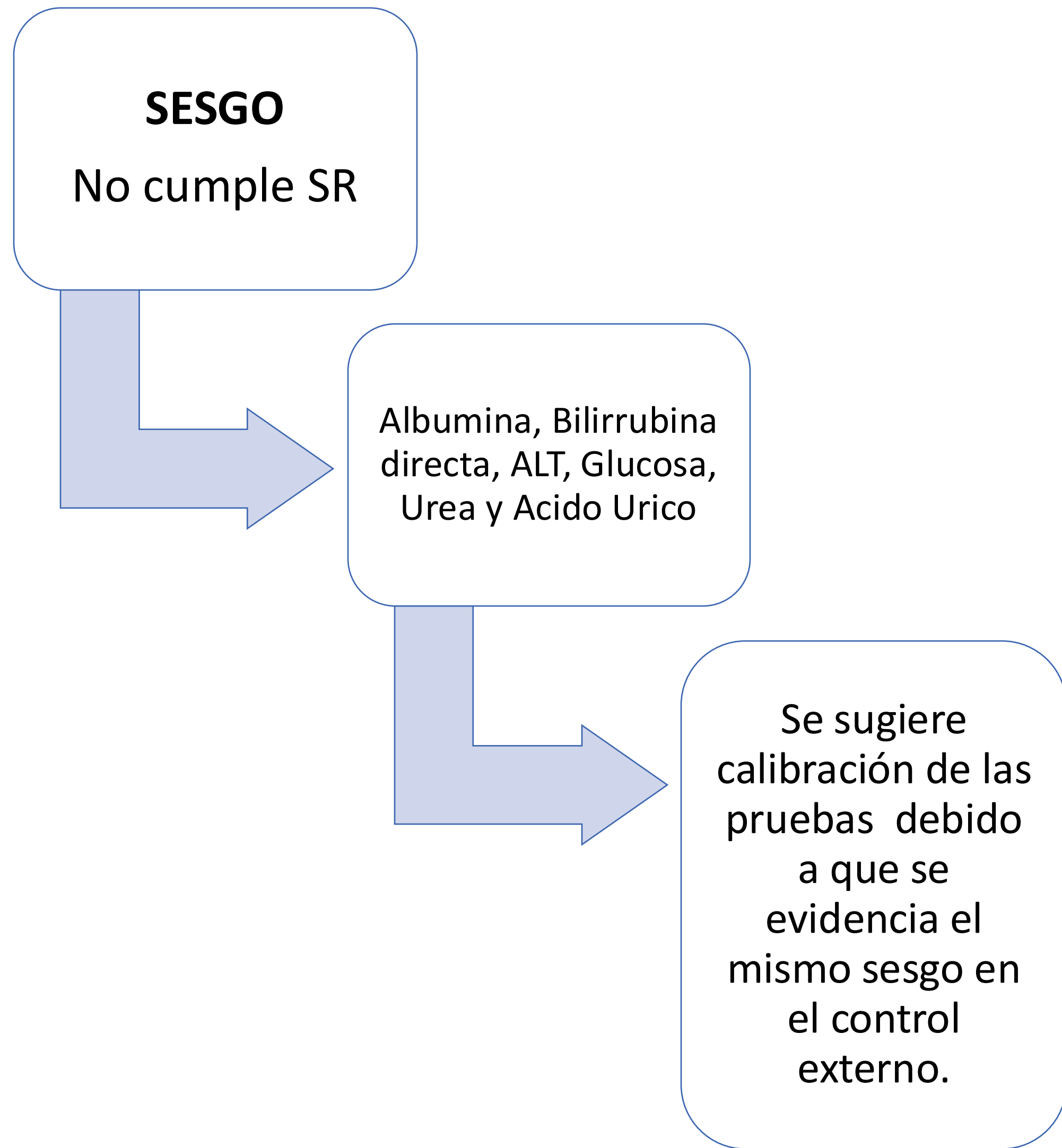

Desempeño general del laboratorio – HORMONAS (Mes FEBRERO A MARZO)

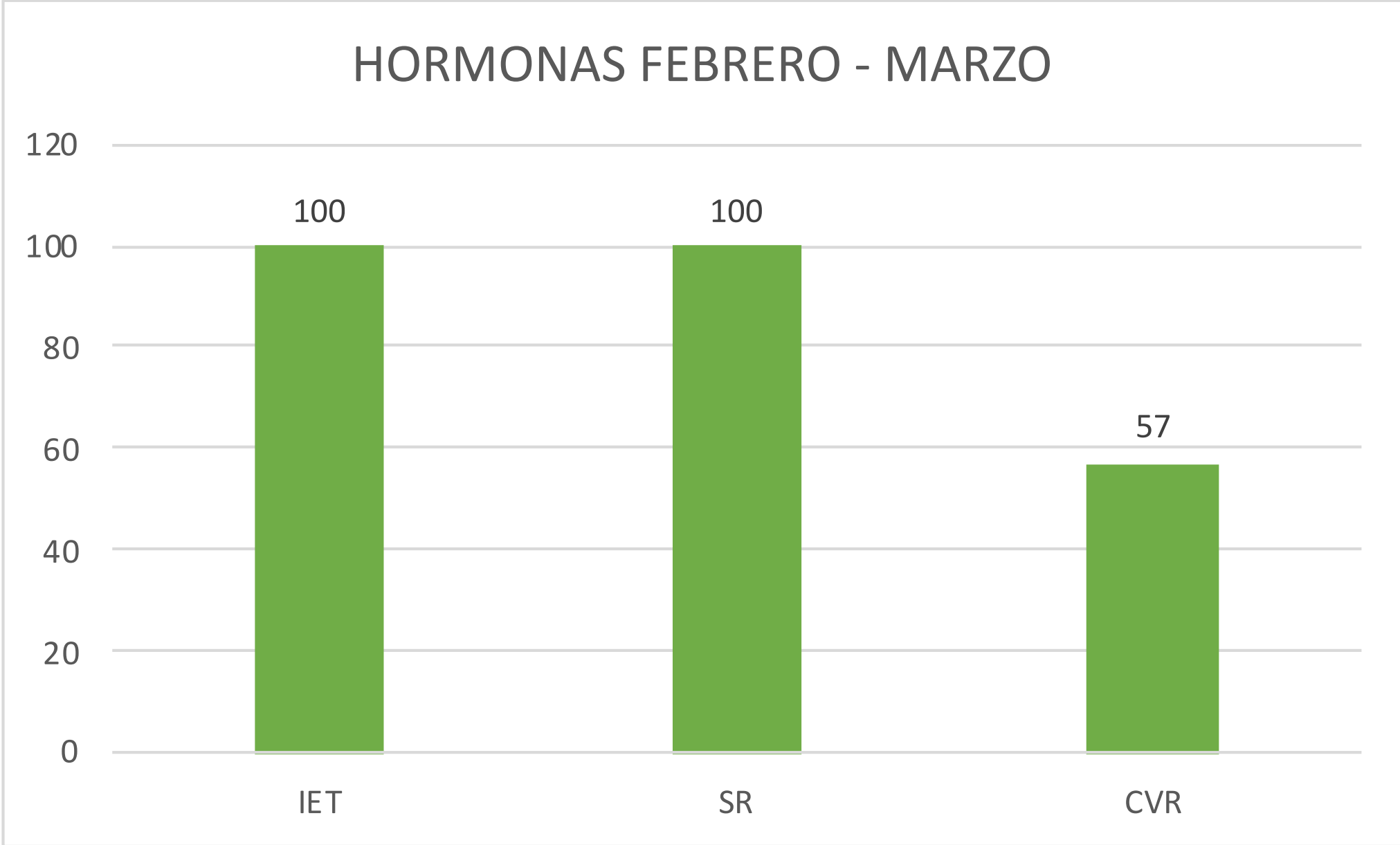

Posterior a la actualización de las metas y objetivos de calidad se obtuvieron los siguientes porcentajes de cumplimiento del control de calidad interno para el área de hormonas:

IET: CON UN CUMPLIMIENTO DE 100%.

SR: PRESENTA UN CUMPLIMIENTO DE 100%

CVR: PRESENTA CUMPLIMIENTO DE 57%

HORMONAS FEBRERO A MARZO			
	TOTAL	# CUMPLE	%
IET	14	14	100
SR	14	14	100
CVR	14	8	57

Análisis de desempeño Control Interno: Hormonas



Informacion de Laboratorio					Información de Test					Objetivos de Calidad				Datos de Desempeño								ICT Indicadores de Competencia Técnica			
No	Sección	Sede	Ciudad	No Lab	Equipo	Lote QC	Analito	Nivel	Unidad	Fuente	%Tea	%CVa	%BIAS	Valor Diana	Media	DS	%CV	%Bias	%ET	IDM	No Datos	CVR	SR	IET	SIG
1	Hormonas	Zarzal	Zarzal	00001	Mindray CL1000i	40430	TSH	1	%	Variabilidad biológica Deseables	27.9	10.7	10.3	0.507	0.528	0.026	4.92	4.142	12.26	0.008	16	0.46	0.402	0.439	4.829
2	Hormonas	Zarzal	Zarzal	00001	Mindray CL1000i	40430	TSH	2	%	Variabilidad biológica Deseables	27.9	10.7	10.3	6.44	6.835	0.341	4.99	6.134	14.368	0.107	16	0.466	0.596	0.515	4.362
3	Hormonas	Zarzal	Zarzal	00001	Mindray CL1000i	40430	TSH	3	%	Variabilidad biológica Deseables	27.9	10.7	10.3	38.22	39.84	1.967	4.94	4.239	12.39	0.615	16	0.462	0.412	0.444	4.79
4	Hormonas	Zarzal	Zarzal	00001	Mindray CL1000i	40430	T4 Libre	1	%	Variabilidad Biologica Mínimas	9.4	3.6	3.5	1.45	1.438	0.05	3.48	-0.828	6.57	0.016	15	0.967	0.237	0.699	2.463
5	Hormonas	Zarzal	Zarzal	00001	Mindray CL1000i	40430	T4 Libre	2	%	Variabilidad Biologica Mínimas	9.4	3.6	3.5	3.75	3.852	0.12	3.12	2.72	7.868	0.039	15	0.867	0.777	0.837	2.141
6	Hormonas	Zarzal	Zarzal	00001	Mindray CL1000i	40430	T4 Libre	3	%	Variabilidad Biologica Mínimas	9.4	3.6	3.5	5.857	5.857	0.198	3.38	0	5.577	0.064	15	0.939	0	0.593	2.781
7	Hormonas	Zarzal	Zarzal	00001	Mindray CL1000i	40430	HCG	1	%	CLIA-USA	18	6	8.1	5.845	5.845	0.406	6.95	0	11.468	0.131	15	1.158	0	0.637	2.59
8	Hormonas	Zarzal	Zarzal	00001	Mindray CL1000i	40430	HCG	2	%	CLIA-USA	18	6	8.1	23.627	23.627	1.435	6.07	0	10.016	0.463	15	1.012	0	0.556	2.965
9	Hormonas	Zarzal	Zarzal	00001	Mindray CL1000i	40430	HCG	3	%	CLIA-USA	18	6	8.1	203.989	203.989	13.151	6.45	0	10.642	4.244	15	1.075	0	0.591	2.791
10	Hormonas	Zarzal	Zarzal	00001	Mindray CL1000i	40430	PSA	1	%	Variabilidad Biologica Mínimas	24.4	5.1	16	0.592	0.604	0.039	6.46	2.027	12.686	0.012	17	1.267	0.127	0.52	3.463
11	Hormonas	Zarzal	Zarzal	00001	Mindray CL1000i	40430	PSA	2	%	Variabilidad Biologica Mínimas	24.4	5.1	16	2.96	3.149	0.143	4.54	6.385	13.876	0.043	17	0.89	0.399	0.569	3.968
12	Hormonas	Zarzal	Zarzal	00001	Mindray CL1000i	40430	PSA	3	%	Variabilidad Biologica Mínimas	24.4	5.1	16	18.88	19.581	0.897	4.58	3.713	11.27	0.272	17	0.898	0.232	0.462	4.517
13	Hormonas	Zarzal	Zarzal	00001	Mindray CL1000i	67700	Troponina I	1	%	Variabilidad Biologica Mínimas	41.9	10.5	24.5	0.045	0.045	0.01	22.22	0	36.663	0.003	14	2.116	0	0.875	1.886
14	Hormonas	Zarzal	Zarzal	00001	Mindray CL1000i	67700	Troponina I	2	%	Variabilidad Biologica Mínimas	41.9	10.5	24.5	1.1	1.1	0.268	24.36	0	40.194	0.09	14	2.32	0	0.959	1.72

- Se evidencia imprecisión en los 3 niveles de BHCG, 1er nivel del PSA y los 2 niveles de la Troponina debido al no cumplimiento del CVR. Se sugiere revisar el manejo de los controles por parte de los usuarios.

Recomendaciones de control interno para MARCADORES CARDIACOS:



CONSERVACIÓN Y ESTABILIDAD

Este producto permanecerá estable hasta la fecha de caducidad, siempre que esté almacenado sin abrir a una temperatura entre -20 y -70°C. No almacene este producto en un congelador con ciclo de congelación/descongelación.


Descongelado y abierto: Una vez descongelado y abierto el producto, si se almacena bien tapado a una temperatura entre 2 y 8°C, permanecerá estable como se indica a continuación: Todos los analitos: 20 días
Excepto: Mioglobina: 10 días, Propéptido natriurético cerebral N-terminal (NT-proBNP), Péptido natriurético cerebral (BNP) y Troponina I: 5 días; Troponina T: 4 días

Alicuota congelada: Una vez descongelado y abierto el producto, si se almacena bien tapado en viales de alicuotas a una temperatura entre -20 y -70°C, permanecerá estable como se indica a continuación: Todos los analitos: 30 días.

Deseche el material sobrenadante. Este producto se transporta congelado.

- ✓ Se recomienda seguir las indicaciones de inserto para el manejo del control. Este debe conservarse a una temperatura entre -20 y -70°C (**Congelación**). Se sugiere realizar alícuotas del control y almacenarlas en congelación para maximizar su estabilidad y vida útil. Para evitar cambios bruscos de temperatura se sugiere pasar las alícuotas de congelación a refrigeración 20 min y posteriormente a temperatura ambiente otros 20 min antes de su procesamiento.
- ✓ Se recomienda hacer seguimiento al desempeño de las pruebas, **no aceptar datos cercanos o por fuera de la meta de calidad** y hacer reprocesos cuando se detectan errores aleatorios para que no afecte el coeficiente de variación.
- ✓ Se recomienda registrar los comentarios de los cambios y las acciones correctivas tomadas con la prueba en el programa ValiQC.

Desempeño general del laboratorio – COAGULACION (Mes FEBRERO A MARZO)

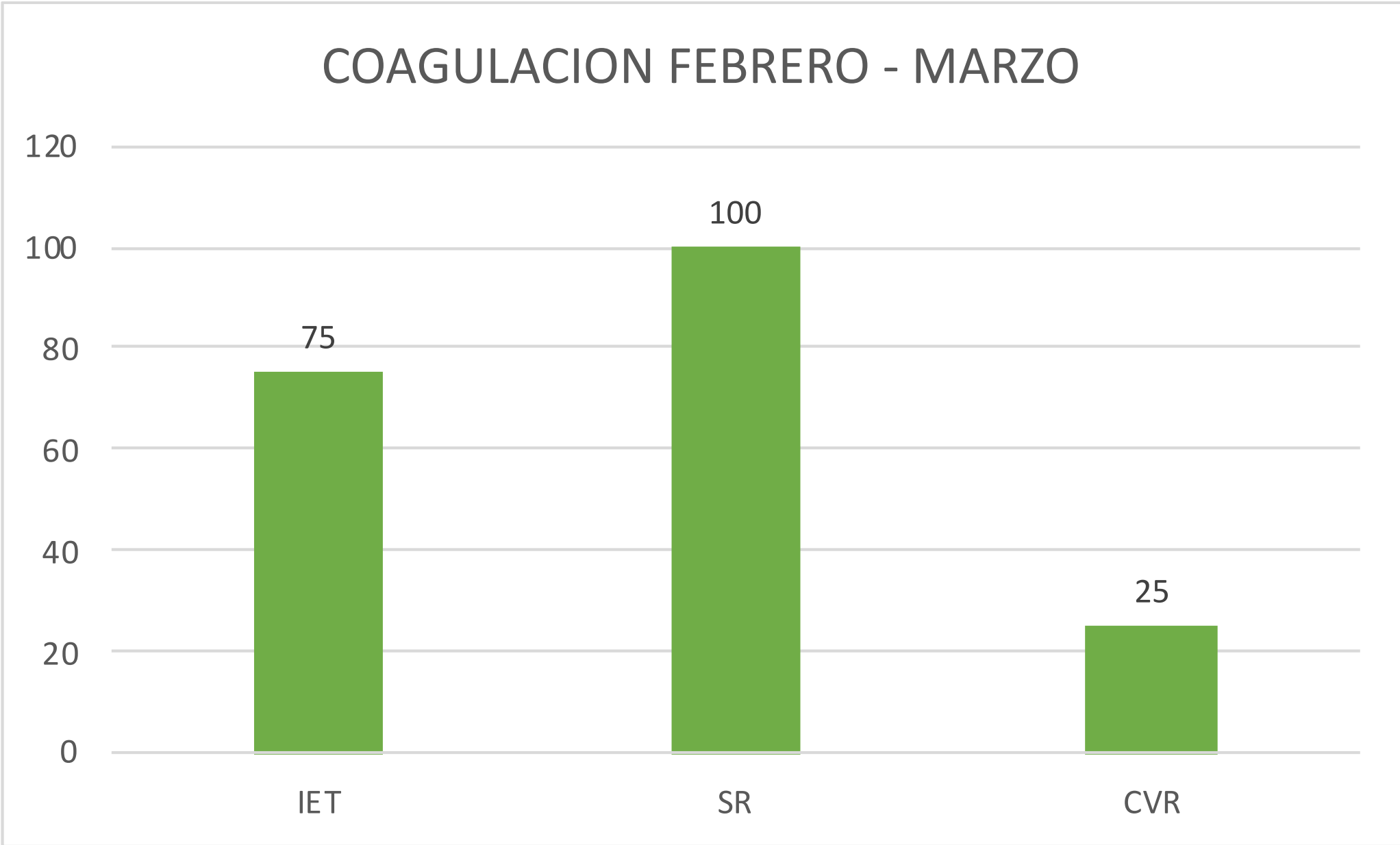

Posterior a la actualización de las metas y objetivos de calidad se obtuvieron los siguientes porcentajes de cumplimiento del control de calidad interno para el área de coagulación:

IET: CON UN CUMPLIMIENTO DE 75%.

SR: PRESENTA UN CUMPLIMIENTO DE 100%

CVR: PRESENTA CUMPLIMIENTO DE 25%


COAGULACION FEBRERO A MARZO			
	TOTAL	# CUMPLE	%
IET	4	3	75
SR	4	4	100
CVR	4	1	25

Análisis de desempeño Control Interno: Coagulación



Información de Laboratorio					Información de Test					Objetivos de Calidad				Datos de Desempeño								ICT Indicadores de Competencia Técnica			
No	Sección	Sede	Ciudad	No Lab	Equipo	Lote QC	Analito	Nivel	Unidad	Fuente	%Tea	%CVa	%BIAS	Valor Diana	Media	DS	%CV	%Bias	%ET	IDM	No Datos	CVR	SR	IET	SIG
1	Coagulación	Zarzal	Zarzal	00001	RAYTO-2204C	84710	PTT	1	%	CLIA-USA	15	5	6.8	29.46	29.733	1.944	6.54	0.927	11.718	0.557	19	1.308	0.136	0.781	2.152
2	Coagulación	Zarzal	Zarzal	00001	RAYTO-2204C	84710	PTT	2	%	CLIA-USA	15	5	6.8	53.5	51.813	3.464	6.69	-3.153	14.192	0.993	19	1.338	0.464	0.946	1.771
3	Coagulación	Zarzal	Zarzal	00001	RAYTO-2204C	84710	Tiempo de Protrombina	1	%	CLIA-USA	15	5	6.8	11.315	11.337	0.483	4.26	0.194	7.223	0.139	19	0.852	0.029	0.482	3.476
4	Coagulación	Zarzal	Zarzal	00001	RAYTO-2204C	84710	Tiempo de Protrombina	2	%	CLIA-USA	15	5	6.8	26.53	25.876	2.866	11.08	-2.465	20.747	0.822	19	2.216	0.362	1.383	1.131


- Se evidencia imprecisión en los 2 niveles del PTT y en el 2do nivel del PT debido al no cumplimiento del CVR. Se sugiere revisar el manejo de los controles por parte de los usuarios, así como el manejo y estabilidad de los reactivos frente a inserto.

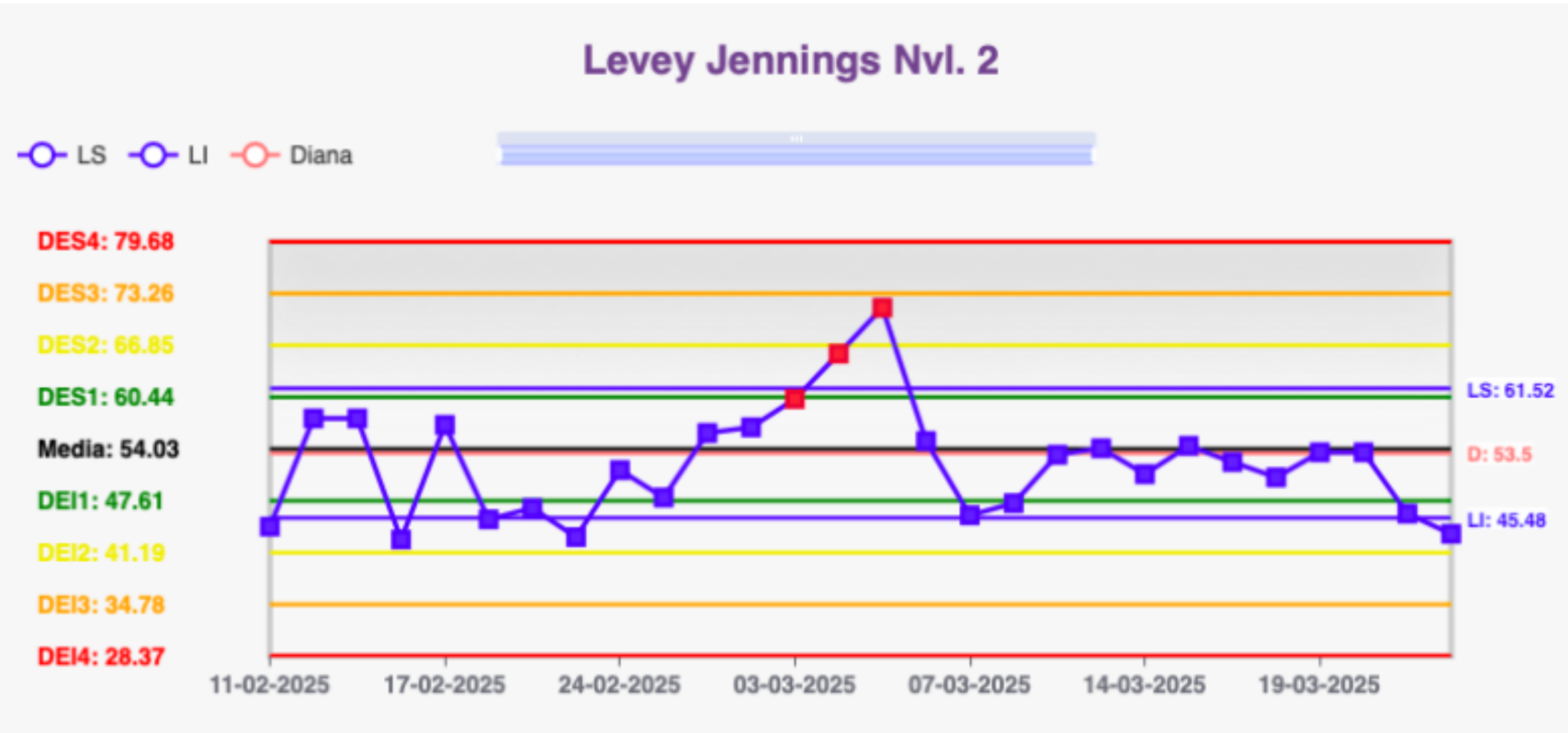

NOTA:

- Rechazar los puntos que se salen de los limites para no afectar los ICT.
- Documentar las acciones correctivas realizadas.

Desempeño general del laboratorio – HEMATOLOGIA (Mes FEBRERO A MARZO)

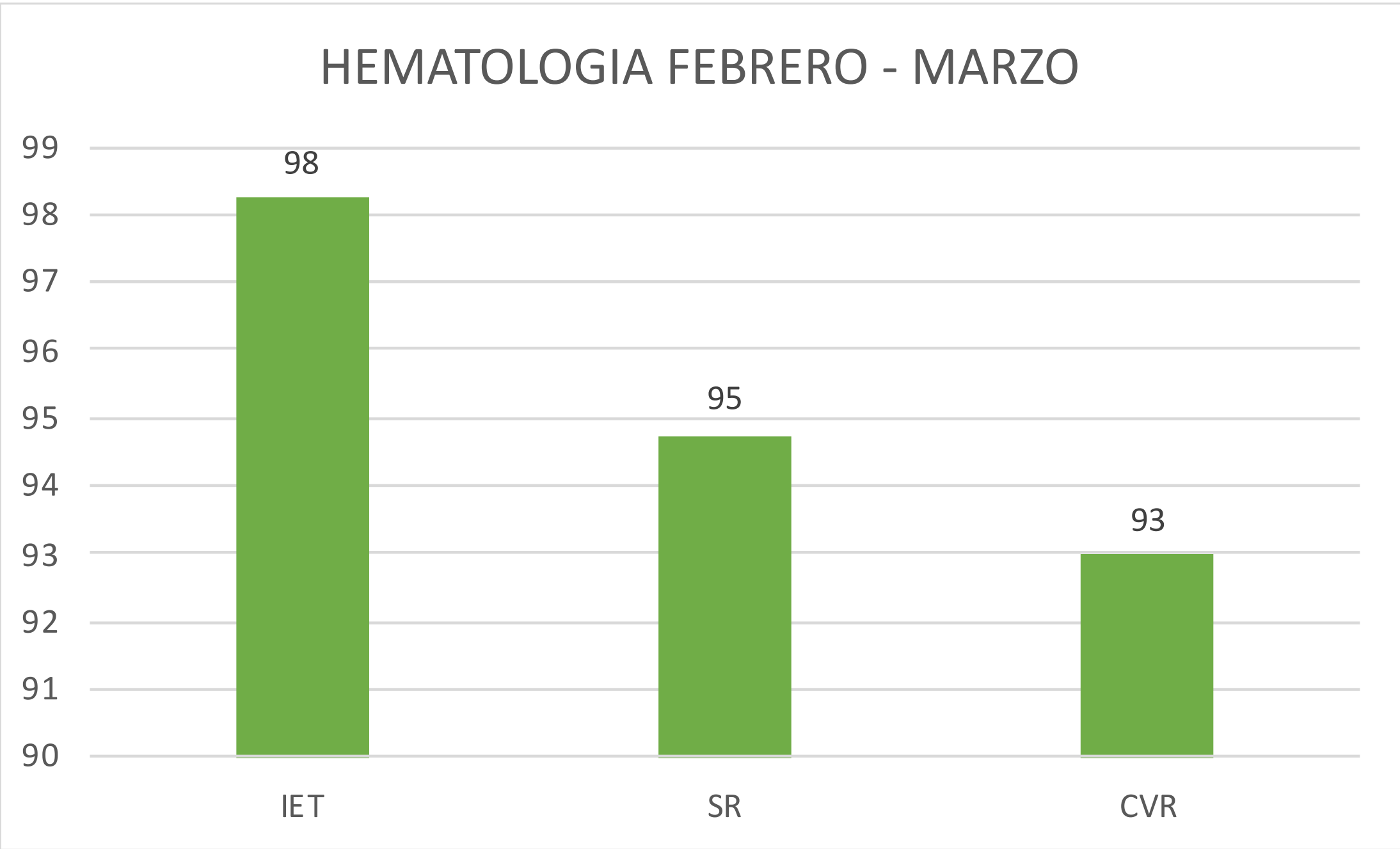

Posterior a la configuración de las metas y objetivos de calidad se obtuvieron los siguientes porcentajes de cumplimiento del control de calidad interno para el área de hematología:

IET: CON UN CUMPLIMIENTO DE 98%.

SR: PRESENTA UN CUMPLIMIENTO DE 95%

CVR: PRESENTA CUMPLIMIENTO DE 93%

HEMATOLOGIA FEBRERO A MARZO			
	TOTAL	# CUMPLE	%
IET	57	56	98
SR	57	54	95
CVR	57	53	93

ValiQC

Control Calidad Interno

Administración

Configuración Media y DS

Avatar

Settings

Dashboard

Configuración Media y DS

Sede *
Zarzal

Sección *
Hematología

Material *
CONTROL HEMATOLOGY

Lote *
BC2503BH

Test
Leucocitos | x10^3/...

Buscar

Crear +

Buscar

Analito	Unidades	Nivel	Media	Ds	Cv	Tipo de dato	Última actualización	Responsable	Editar
Leucocitos	x10^3/uL	1	0	0	0	fecha	2024-08-21	ANNARVALI	
Leucocitos	x10^3/uL	2	0	0	0	fecha	2024-08-21	ANNARVALI	
Leucocitos	x10^3/uL	3	0	0	0	fecha	2024-08-21	ANNARVALI	


RECORDATORIO: Importante configurar media, DS y CV al cambiar de lote.

Análisis de desempeño Control Interno: Hematología



Información de Laboratorio					Información de Test					Objetivos de Calidad				Datos de Desempeño								ICT Indicadores de Competencia Técnica			
No	Sección	Sede	Ciudad	No Lab	Equipo	Lote QC	Analito	Nivel	Unidad	Fuente	%Tea	%CVa	%BIAS	Valor Diana	Media	DS	%CV	%Bias	%ET	IDM	No Datos	CVR	SR	IET	SIG
1	Hematología	Zarzal	Zarzal	00001	Mindray BC 5390	BC2503BH	Leucocitos	1	%	Variabilidad Biologica Mínimas	21.4	8.3	7.7	3.2	2.843	0.031	1.09	-11.156	12.955	0.022	3	0.131	1.449	0.605	9.398
2	Hematología	Zarzal	Zarzal	00001	Mindray BC 5390	BC2503BH	Leucocitos	2	%	Variabilidad Biologica Mínimas	21.4	8.3	7.7	8.05	6.49	0.425	6.55	-19.379	30.187	0.307	3	0.789	2.517	1.411	0.309
3	Hematología	Zarzal	Zarzal	00001	Mindray BC 5390	BC2503BH	Leucocitos	3	%	Variabilidad Biologica Mínimas	21.4	8.3	7.7	17.1	15.41	0.181	1.17	-9.883	11.814	0.131	3	0.141	1.284	0.552	9.844
43	Hematología	Zarzal	Zarzal	00001	Mindray BC 5390	BC2503BH	MCV	1	%	Variabilidad Biologica Mínimas	2.5	0.5	1.5	85.3	85.3	0.52	0.61	0	1.006	0.375	3	1.22	0	0.402	4.098
44	Hematología	Zarzal	Zarzal	00001	Mindray BC 5390	BC2503BH	MCV	2	%	Variabilidad Biologica Mínimas	2.5	0.5	1.5	93.133	93.133	0.404	0.43	0	0.709	0.292	3	0.86	0	0.284	5.814
45	Hematología	Zarzal	Zarzal	00001	Mindray BC 5390	BC2503BH	MCV	3	%	Variabilidad Biologica Mínimas	2.5	0.5	1.5	101.467	101.467	0.473	0.47	0	0.776	0.341	3	0.94	0	0.31	5.319
46	Hematología	Zarzal	Zarzal	00001	Mindray BC 5390	BC2503BH	HCM	1	%	Variabilidad Biologica Mínimas	2.6	0.5	1.7	25.833	25.833	0.252	0.98	0	1.617	0.182	3	1.96	0	0.622	2.653
47	Hematología	Zarzal	Zarzal	00001	Mindray BC 5390	BC2503BH	HCM	2	%	Variabilidad Biologica Mínimas	2.6	0.5	1.7	28.167	28.167	0.231	0.82	0	1.353	0.167	3	1.64	0	0.52	3.171
48	Hematología	Zarzal	Zarzal	00001	Mindray BC 5390	BC2503BH	HCM	3	%	Variabilidad Biologica Mínimas	2.6	0.5	1.7	30.7	30.7	0.3	0.98	0	1.617	0.217	3	1.96	0	0.622	2.653

- Se evidencia sesgo persistente en el recuento de leucocitos debido al no cumplimiento del sesgo relativo en los 3 niveles del control. Se sugiere calibración del instrumento debido a que se evidencia el mismo sesgo en el control externo.
- Se evidencia imprecisión en el nivel 3 de MCV y en los tres niveles de HCM debido al no cumplimiento del CVR. Se sugiere revisar el manejo de los controles por parte de los usuarios.

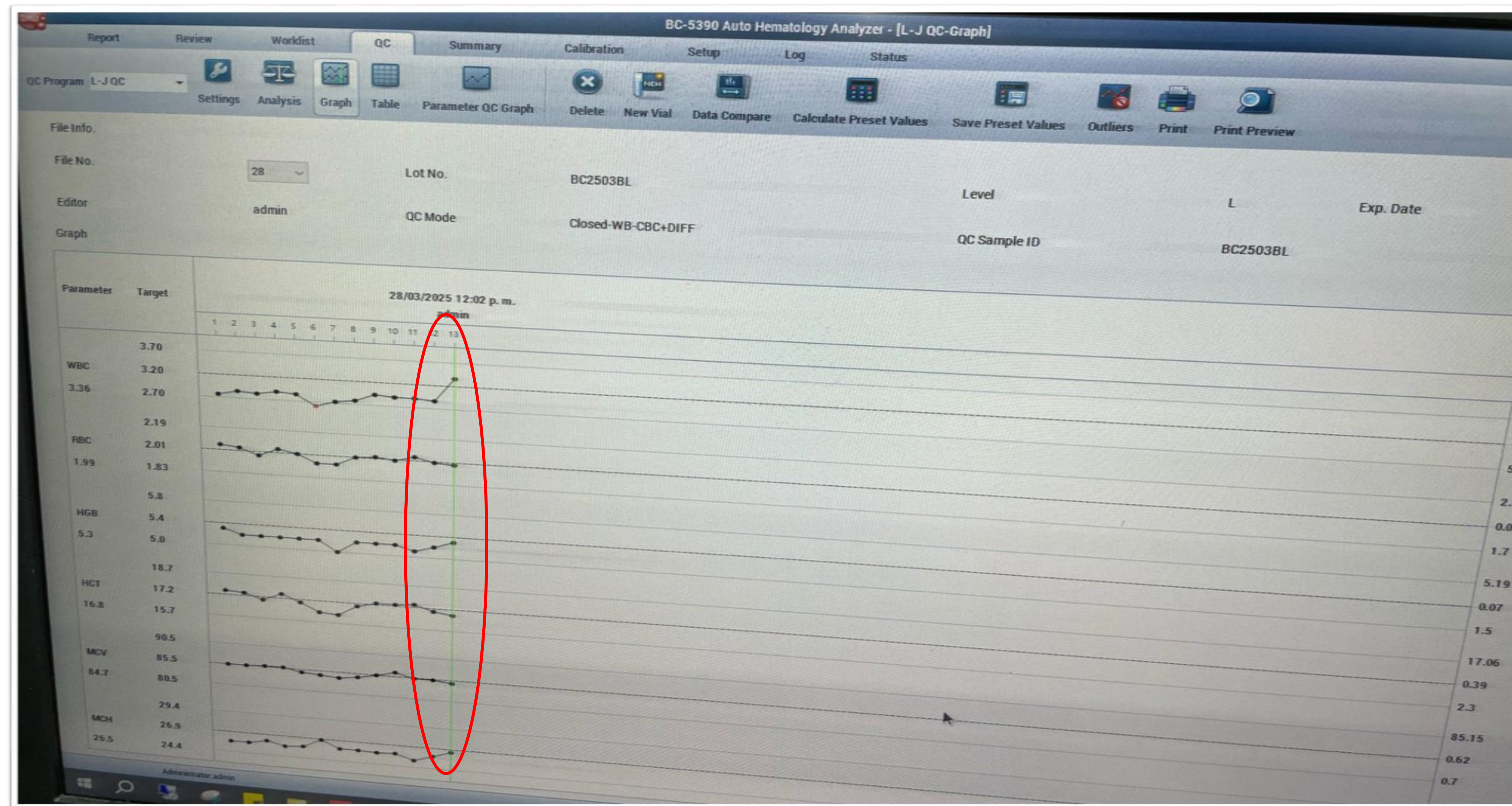

- Se realiza calibración del instrumento de hematología por parte del asesor de aplicaciones. Se evidencia mejora en el control de calidad interno con recuperación del sesgo negativo persistente.
- Se sugiere seguimiento al control de calidad interno e ingreso de los datos en el Software ValiQc.

Desempeño general del laboratorio – UROANALISIS (Mes FEBRERO A MARZO)



Sección	N° Datos	Concordancia	No concordancia	% Aceptación	% Rechazados	Métrica Sigma
Uroanalisis	60	60	0	100 %	0 %	>6



Los analitos evaluados se encuentran con desempeño ACEPTABLE, ya que todos los parámetros evaluados cumplen con un 100% de concordancia.

Analitos en seguimiento



IT	Analito	Causa del seguimiento	Acción sugerida
1	Albumina, Bilirrubina directa, ALT, Glucosa, Urea y Acido Urico. ALP, AST, Glucosa, Urea	Sesgo persistente presentado en los analitos debido a calibración e imprecisión.	Calibración de las pruebas. Revisar la fase preanalítica del manejo del control interno.
2	HCG, PSA, TROPO	Imprecisión en los niveles del control.	Revisión del manejo del control interno y de los reactivos.
3	PTT, PT	Imprecisión en los dos niveles del control.	Revisión del manejo del control interno y de los reactivos. Estabilidad de los mismos por inserto.
4	WBC, MCV, HCM	Sesgo negativo persistente en WBC. Imprecisión en MCV y HCM	Calibración del instrumento con calibrador y revisión del manejo del control interno.

Compromisos adquiridos



IT	Descripción	Responsable
1	Capacitación al personal en el manejo del control de calidad interno y externo. E interpretación y análisis de los mismos.	Diana M. Velásquez – Asesora.
2	Estandarizar el manejo de los controles de calidad internos por parte de los usuarios. Realizar alícuotas del control según corresponda.	Dra. Mónica Herrera y Bacteriólogos.
3		
4		

A low-angle, upward-looking shot of a modern, multi-story glass building at night. The building's facade is composed of large glass panels and dark structural elements. Several windows are illuminated from within, and a bright light source, possibly the sun setting or rising, is visible through the glass on the left side, creating a strong lens flare and illuminating the sky. The overall color palette is dominated by deep blues and purples, with the white text providing a sharp contrast.

Innovación que transforma

in Annar |  annarht

    Annar Health Technologies

www.annardx.com